

LuvaxLatexCirúrgicas Esterilizadas



Descrição geral

Recomenda-se o uso de luvas por para reduzir o risco de contaminação das mãos de profissionais da saúde com sangue e outros fluidos corporais; para reduzir o risco de disseminação de micro-organismos no ambiente e de transmissão do profissional da saúde para o paciente e vice-versa, bem como de um paciente para outro. As luvas devem, portanto, ser utilizadas durante todas as atividades de atendimento ao paciente que podem envolver a exposição a sangue e outros fluidos corporais (inclusive o contato com membranas mucosas e pele não intacta), durante as precauções de contato e situações de surto.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Regulamentação	Diretiva 93/42/CEE DM Regulation (EU) 2017/745
Norma	EN ISO 13485; EN ISO 18001; EN ISO 14001; EN455-1:2000; EN455-2:2015
Fabricante	FITONE LATEX PRODUCTS CO., LTD. GUANGDONG No.5 Huitong Road Lingbei Industrial Zone, Suixi Zhanjiang, Guangdong
REF	L02
Nome Produto	Luvas Cirurgicas Esterilizadas
Material	Latex - Sem Pó
AQL	0.65
Cor	Branças
Tamanhos	6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5
Validade	3 anos

MEDIDAS DAS LUVAS

TAMANHOS	COMPRIMENTO (MM)	LARGURA(MM)
5	≥ 250	67 ± 4
5.5	≥ 250	72 ± 4
6	≥ 260	77 ± 4
6.5	≥ 260	83 ± 5
7	≥ 270	89 ± 5
7.5	≥ 270	95 ± 5
8	≥ 270	102 ± 4
8.5	≥ 280	108 ± 6
9	≥ 280	114 ± 6
9.5	≥ 280	121 ± 6

DESCRIÇÃO

Luva esterilizada com Óxido de etileno, seladas e embaladas individualmente.

DICAS

1. Uma vez que as luvas são artigos de uso único, a limpeza e o reprocessamento de luvas não são recomendados e devem ser evitados, mesmo que isso seja uma prática comum em muitos estabelecimentos de saúde com poucos recursos e onde o fornecimento de luvas é limitado.
2. O uso de luvas não modifica as indicações de higiene das mãos, ou seja, não substitui a ação de higiene das mãos friccionando as mãos com preparação alcoólica ou higienizando as mãos com água e sabonete líquido.
3. Use luvas quando for possível prever o contato com sangue ou outros fluidos corporais, membranas mucosas, pele não intacta ou materiais potencialmente infecciosos.
4. Retire as luvas depois de cuidar de um paciente. Não use o mesmo par de luvas para o atendimento de mais de um paciente.
5. Ao usar luvas, troque ou retire as luvas, durante o atendimento ao paciente, ao mudar de um sítio anatômico contaminado para outro (incluindo membrana mucosa, pele não intacta ou um dispositivo médico no mesmo paciente ou no ambiente).
6. A reutilização das luvas após reprocessamento ou descontaminação não é recomendável.
7. Pessoas com sensibilidade ou alergia conhecida a luvas de latex NÃO devem usar este produto.
3. Armazene em local fresco (<25 ° C), seco e bem ventilado, longe de agentes oxidantes fortes (por exemplo, ozônio), luz solar e fontes de ignição. Não há requisitos especiais de transporte.

Luvas Latex Cirúrgicas Esterilizadas



Descrição geral

Recomenda-se o uso de luvas por para reduzir o risco de contaminação das mãos de profissionais da saúde com sangue e outros fluidos corporais; para reduzir o risco de disseminação de micro-organismos no ambiente e de transmissão do profissional da saúde para o paciente e vice-versa, bem como de um paciente para outro. As luvas devem, portanto, ser utilizadas durante todas as atividades de atendimento ao paciente que podem envolver a exposição a sangue e outros fluidos corporais (inclusive o contato com membranas mucosas e pele não intacta), durante as precauções de contato e situações de surto.



INSTRUÇÕES (COMO COLOCAR AS LUVAS)




1. Depois de lavar bem as mãos, retirar 1 luva da caixa original



2. Tocar apenas em zonas restritas da luva, correspondendo à região do pulso



3. Colocar a 1ª luva

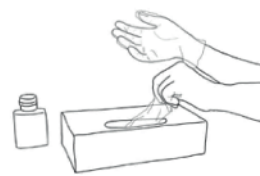

4. Retirar a 2ª luva, tocando apenas na zona correspondente à região do pulso




5. Para evitar tocar na pele do antebraço com a luva já vestida, pegar na superfície externa da luva que estamos a vestir, com os dedos dobrados da outra mão




6. Uma vez colocadas as luvas, as mãos não devem tocar em mais nada que não seja o que está contemplado no procedimento a efetuar

INSTRUÇÕES (COMO RETIRAR AS LUVAS)

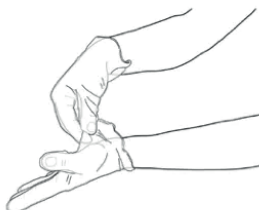

1. Pegar numa luva na zona do pulso, e sem tocar na pele do antebraço, puxar a luva completamente.

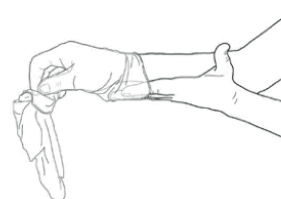

2. Manter a luva pressionada entre os dedos, e colocar a mão contrária (sem luva) entre a luva e o pulso. Remover a segunda luva, rolando até cobrir completamente a primeira



3. Colocar as luvas no contentor apropriado

SINTOMAS

Pele

Os componentes das luvas de latex podem causar irritação e sensibilização e reação alérgica na pele em alguns indivíduos.

Os sintomas podem incluir:

secura, rachaduras na pele, feridas, inchaços, comichão ou erupção cutânea sob a luva. Nota: Este produto NÃO contém proteínas de látex naturais.

Reação cutânea

Caso tenha algum destes sintomas, retire imediatamente as luvas, e procure ajuda médica e/ou numa farmácia.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Reatividade

Condições a evitar: Calor e luz ultravioleta;

Materiais Incompatíveis: Evite o contato com agentes oxidantes fortes (por exemplo, ozônio).

Produtos de decomposição perigosos: Fumo preto e fumaça, carbono monóxido e dióxido de carbono, óxidos de enxofre, óxidos de nitrogênio, hidrogênio cianeto e hidrocarbonetos.

Problemas ambientais

Não são esperadas questões ambientais significativas.

Deve ser incinerado em instalações com lavadores.

O material de embalagem de papelão deve ser separado para reciclagem.