

REF L031-118M5	REF L031-118N5	REF L031-118W5	Português
REF L031-118P5	REF L031-118Z5	REF L031-118R5	

Um teste rápido para a deteção de antígenos nucleocapsídeos de SARS-CoV-2 em amostras de esfregaço nasal anterior. Apenas para uso diagnóstico in vitro. Para autoteste. Teste para uso não profissional – por leigos (pessoa que não tem qualificações formais numa área relevante dos cuidados de saúde nem num domínio médico).
Leia atentamente as instruções antes de realizar o teste.

PREPARAÇÃO

1.



Lave ou desinfete as mãos. Certifique-se de que as mãos estão secas antes de iniciar o teste.

2.



Leia as instruções antes de utilizar o kit de teste rápido de antígeno do SARS-CoV-2.

3.



Verifique a data de validade impressa na embalagem de alumínio da cassete.


4.



Abra a embalagem. Verifique a janela de resultados e poço de amostra na cassete.


PROCEDIMENTO DE TESTE

1.

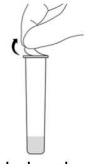

Retire o papel de alumínio do topo do tubo do tampão de extração.

2.

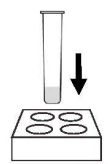


Insira o tubo no orifício da caixa do kit. (Ou posicione o tubo no suporte para tubos.)

3.




Abra a embalagem da zaragatoa na extremidade da haste. **Atenção:** Não toque na ponta absorvente da zaragatoa com as mãos.

4.

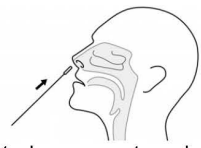

Insira toda a ponta absorvente da zaragatoa dentro de uma das cavidades nasais. Usando uma rotação suave, empurre a zaragatoa para menos de 2,5 cm da borda da narina.

5.

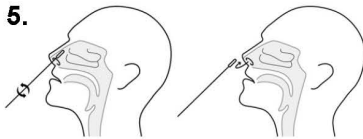


Rode a zaragatoa 5 vezes contra o interior da narina. Retire a zaragatoa e insira-a na outra narina. Repita o passo 4.

6.




Retire a zaragatoa da narina.

7.

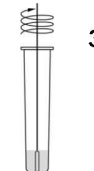


Insira a zaragatoa no tubo e agite-o durante 30 segundos.

8.

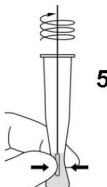

Rode a zaragatoa 5 vezes enquanto aperta a parte lateral do tubo.

9.

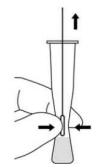


Retire a zaragatoa enquanto aperta o tubo.

10.



Coloque a ponta do conta-gotas firmemente no tubo do tampão de extração. Misture bem, agitando ou sacudindo o fundo do tubo.

11.

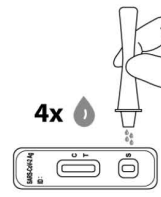

Aperte suavemente o tubo e verta **4 gotas** de solução para dentro do poço de amostra.

12.



15-30 minutos.

Leia o resultado quando o temporizador atingir 15-30 minutos. Não leia o resultado após 30 minutos.

Materiais fornecidos	Quantidade (un.)					
	1 T	2 T	3 T	5 T	20 T	25 T
Cassete de teste	1	2	3	5	20	25
Tubo do tampão de extração	1	2	3	5	20	25
Zaragatoa descartável	1	2	3	5	20	25
Saco para resíduos	1	2	3	5	20	25
Suporte para tubos	/	/	/	/	1	1
Folheto informativo	1	1	1	1	1	1

Material necessário mas não fornecido

Temporizador

COLHEITA DE AMOSTRAS

COLHEITA AUTÓNOMA



COLHEITA POR UM CUIDADOR ADULTO




A amostra com zaragatoa nasal pode ser recolhida pela própria pessoa desde que tenha mais de 18 anos. Para crianças com menos de 18 anos, a colheita deve ser realizada por um dos pais ou responsável legal. Siga sempre as orientações locais para realizar a colheita de amostras em crianças.

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS




Negativo

Apenas aparece a linha de controlo (C) e não a linha de teste (T). Isto significa que não foi detetado antígeno do SARS-CoV-2. Um resultado negativo indica que é improvável que a pessoa tenha atualmente COVID-19. Continue a seguir todas as regras e medidas de proteção aplicáveis quando estiver em contacto com outras pessoas. A pessoa pode estar infetada mesmo que o teste seja negativo.

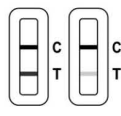

Positivo

Aparece a linha de controlo (C) e a linha de teste (T). Isto significa que foi detetado antígeno do SARS-CoV-2. **NOTA:** Qualquer linha tênue que esteja presente na região da linha de teste (T) deve ser considerada um positivo. Um resultado positivo significa que é muito provável que a pessoa tenha atualmente COVID-19. Contacte imediatamente o seu médico/clínico geral ou o estabelecimento de saúde local. Siga as orientações locais de isolamento profilático. Deve ser realizado um teste de confirmação por PCR.

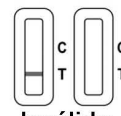

Inválido

A linha de controlo (C) não aparece. Volume insuficiente de amostra ou operação incorreta são os motivos mais prováveis para um resultado inválido. Reveja as instruções e repita o teste com uma nova cassete. Se o resultado do teste permanecer inválido, contacte o seu médico ou um centro de testes COVID-19.

ELIMINAR O KIT DE TESTE COM SEGURANÇA

Todos os componentes que resultem da utilização dos testes rápidos no domicílio dos utentes com resultado negativo devem ser colocados no saco plástico que integra o kit (ou num qualquer saco plástico, caso tal não se verifique) e depositados no contentor dos resíduos indiferenciados juntamente com os restantes resíduos.

No caso de teste rápido com um resultado positivo, pelo princípio da precaução, deve ser colocado em duplo saco - no caso de o kit conter saco plástico, os resíduos deverão ser colocados nesse saco e, posteriormente, colocado dentro de um saco plástico de lixo resistente - e depositado no contentor de resíduos indiferenciados ("lixo comum").

Em nenhuma das situações, os resíduos em causa devem ser depositados no ecoponto ou contentor de recolha seletiva.

