

PENSO HIDROCOLÓIDE COM REBORDO, ESTÉRIL

enerre
P H A R M A



DESCRIÇÃO GERAL

O penso de espuma hidrocolóide é um produto esterilizado descartável. Consiste em adesivo médico de fusão a quente, carboximetilcelulose de sódio, carboximetilcelulose de sódio reticulada e película de PU. O produto tem as funções de absorção de líquido, respirável, bloqueio de água e bactérias de bloqueio. Pode proporcionar um ambiente húmido para a cura de feridas.

USO PRETENDIDO

Adequado para Hospitais e Clínicas.



enerre
P H A R M A

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

REGULAMENTAÇÃO	Diretiva 93/42/EEC
NORMA	ISO 13485:2016
FABRICANTE	ROOSIN MEDICAL CO., LTD No. 8 Yuandong Road, Kouan Town, Gaogang, Taizhou City, Jiangsu Province 225321, P.R. China
REPRESENTANTE EUROPEU	PROLINX GMBH Brehmstraße 56, 40239 Düsseldorf, Alemanha Tel:+49 2131 40519680 Email: info@prolinx.
REF	BHD1010
NOME DO PRODUTO	Penso Hidrocolóide Com Rebordo, Estéril
COMPOSIÇÃO	Carboximetilcelulose de sódio, Carboximetilcelulose de sódio reticulada e película de PU
COR	Amarelo Pálido
DIMENSÕES	100 x 100 mm
DATA DE EMISSÃO DAS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO	Outubro de 2020

PROPRIEDADES

É um penso hidrocolóide absorvente autoadesivo com a camada de cobertura semipermeável, mas impermeável para organismos e água. O hidrocolóide transforma-se em gel quando entra em contato com o exsudado da ferida, formando um ambiente húmido que estimula o efeito da granulação e epitelização.

INDICAÇÕES

Para pequenas quantidades de exsudado durante a cirurgia ou cobertura de feridas, manter as feridas húmidas e absorver o exsudado.

REQUISITOS TÉCNICOS

- a) Aparência
A superfície do penso deve estar limpa e lisa, sem quaisquer impurezas visíveis.
- b) Conforto
A extensibilidade não deve ser superior a 4,0N/cm, a deformação permanente não deve ser superior a 5%.
- c) Absorção de líquidos
A permeabilidade líquida de 24h não deve ser inferior a 1,0g/10cm², A permeabilidade líquida de 48h não deve ser inferior a 2,0g/10cm².
- d) PH
O PH do penso deve situar-se entre 4,0-7,5.
- e) Espessura: Extra fino 0,4-0,6mm, com borda: a espessura média é de 1,3-1,6 mm e a espessura do bordo é de 0,3-0,7 mm

INFORMAÇÃO/ INDICAÇÃO ADICIONAL

1. Irrigue a lesão com soro fisiológico. Seque a pele circundante.
2. Aplique o penso sobre a ferida, deixando uma margem de 3cm.
3. Para conseguir uma boa aderência, coloque, durante alguns instantes, a palma da mão sobre o penso, de forma a fornecer-lhe calor.
4. Para remover o penso, destaque os 4 bordos e retire-o cuidadosamente.

OBSERVAÇÕES

Deverá utilizar-se uma ligadura de compressão no tratamento das úlceras vasculares venosas, e dever-se-ão tomar medidas para o alívio da pressão no tratamento das úlceras de pressão. A colonização de feridas crónicas é normal e não constitui contra-indicação para a utilização destes pensos.

PENSO HIDROCOLÓIDE COM REBORDO, ESTÉRIL



DESCRIÇÃO GERAL

O penso de espuma hidrocolóide é um produto esterilizado descartável. Consiste em adesivo médico de fusão a quente, carboximetilcelulose de sódio, carboximetilcelulose de sódio reticulada e película de PU. O produto tem as funções de absorção de líquido, respirável, bloqueio de água e bactérias de bloqueio. Pode proporcionar um ambiente húmido para a cura de feridas.

USO PRETENDIDO

Adequado para Hospitais e Clínicas.



CONTRA-INDICAÇÕES

Ferimentos com muito exsudativos; feridas infectadas; não utilizar directamente sobre o osso ou tendão; queimaduras muito extensas.

INSTRUÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

Os artigos que aguardam utilização devem ser guardados num local seco, fechado, ventilado e resguardados de potencial contaminação. Em caso de defeito ou dano não use o artigo, substitua por outro.

LIMITAÇÕES AO USO

O artigo é de utilização única.


ELIMINAÇÃO

Cada penso deve ser eliminado de acordo com o processo de gestão de resíduos.


EM CASO DE INCIDENTE

Em caso de incidente grave ocorrido com o dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que os utilizadores e/ou doentes estão estabelecidos.

APRESENTAÇÃO

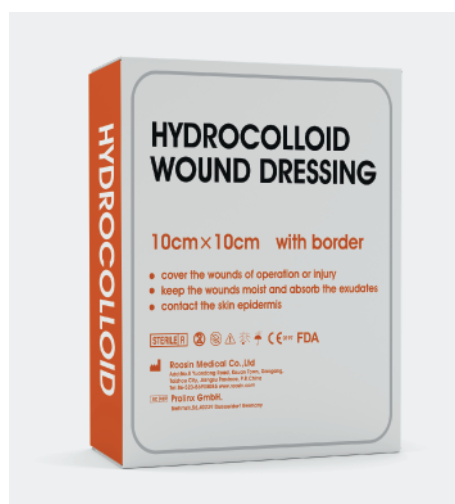

EMBALAGEM EXTERIOR

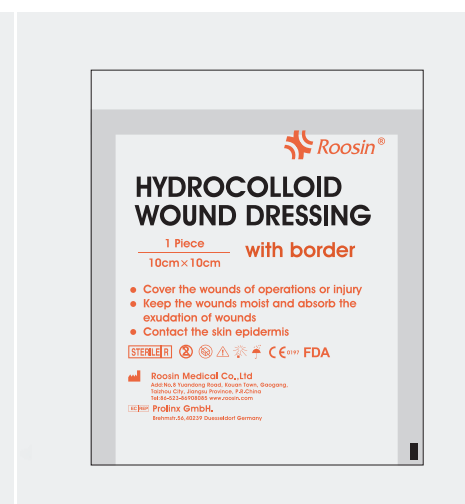

EMBALAGEM INTERIOR