

LUVAS DE VINIL, SEM PÓ, NÃO ESTÉREIS



DESCRIÇÃO GERAL

Luva para procedimento não cirúrgico em policloreto de vinila (vinil) sem pó, superfície lisa, não estéril, isenta de látex, ambidestra, atóxica e apirrogênica, uso único.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

REGULAMENTAÇÃO	Regulamento DM(UE)2017/745 Regulamento EPI(UE)2016/425
NORMA	EN ISO 13485:2016 ; EN455-1:200 ; EN455-2:2015 ; EN455-3:2015 ; EN455-4:2009 ; EN ISO 374-1:2016 ; EN364-2:2014 ; EN16523-1:2015 ; EN 374-4:2013 ; EN ISO 374-5:2016 ; EN ISO 21430:2020
FABRICANTE	JIANGXI RAINBOW MEDICAL PRODUCTS CO., LTD East side of Jianshe Road, Pengze, Jiujiang, Jiangxi, China, 332700
MANDATÁRIO	M/S CMC MEDICAL DEVICES&DRUGS, S.L. C/Horacio Lengo N.18, CP 29006, Malaga-Spain Tel: +34 951387714
REF	RBM-VINYL-CLEAR- S RBM-VINYL-CLEAR- M RBM-VINYL-CLEAR- L
NOME DO PRODUTO	Luvras de Vinil, Sem Pó, Não Estéreis
MATERIAL	Policloreto de Vinila Sem Pó
DESIGN	Cano Curto, Sem Latex
COMPRIMENTO	Mínimo 240 MM
COR	Transparente
TAMANHOS	S (7) / M (8) / L (9) / XL (10)
QUANTIDADE	Caixa de 100 unidades

DIMENSÕES DAS LUVAS

TAMANHO	PESO DA LUVA (G)	COMPRIMENTO (MM)	LARGURA (MM)	ESPESSURA DOS DEDOS	ESPESSURA DA PALMA
S	4.0±0.3	240 MIN.	85±5	0.08±0.02	0.07±0.02
M	4.5±0.3	240 MIN.	95±5	0.08 ±0.02	0.07±0.02
L	5.0±0.3	240 MIN.	105±5	0.08 ±0.02	0.07±0.02
XL	5.5±0.3	240 MIN.	115±5	0.08 ±0.02	0.07±0.02

PROPRIEDADES FÍSICAS

ALONGAMENTO (%)		FORÇA NA PAUSA (N)	
ANTES DE ENVELHECER	DEPOIS DE ENVELHECER	ANTES DE ENVELHECER	DEPOIS DE ENVELHECER
320 MIN	320 MIN	3.6 MIN	3.6 MIN

TABELA MARCAÇÃO CE

DM	REG. 2017/745	CLASSE I	EN 455	AQL 1.5	CE
EPI	REG. 2016/425	CATEGORIA III	EN 374, EN 420	AQL 1.5	CE 2777

INSTRUÇÕES (COMO COLOCAR AS LUVAS)



1. Depois de lavar bem as mãos, retirar 1 luva da caixa original

2. Tocar apenas em zonas restritas da luva, correspondendo à região do pulso

1. Colocar a luva.



LUVAS DE VINIL, SEM PÓ, NÃO ESTÉREIS



INSTRUÇÕES (COMO RETIRAR AS LUVAS)



4. Retirar a 2ª luva, tocando apenas na zona correspondente à região do pulso.




5. Para evitar tocar na pele do antebraço com a luva já vestida, pegar na superfície externa da luva que estamos a vestir, com os dedos dobrados da outra mão.




6. Uma vez colocadas as luvas, as mãos não devem tocar em mais nada que não seja o que está contemplado no procedimento a efetuar.


INSTRUÇÕES (COMO RETIRAR AS LUVAS)

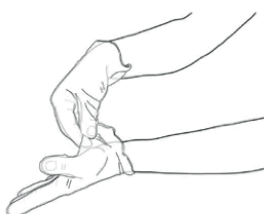

1. Pegar numa luva na zona do pulso, e sem tocar na pele do antebraço, puxar a luva completamente.

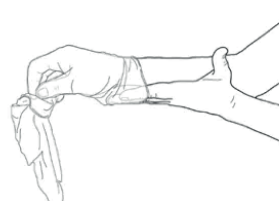

2. Manter a luva pressionada entre os dedos, e colocar a mão contrária (sem luva) entre a luva e o pulso. Remover a segunda luva, enrolando até cobrir completamente a primeira.

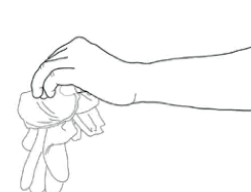

3. Colocar as luvas no contentor apropriado.

APRESENTAÇÃO



DESCRIÇÃO GERAL

Luva para procedimento não cirúrgico em policloreto de vinila (vinil) sem pó, superfície lisa, não estéril, isenta de látex, ambidestra, atóxica e apirrogênica, uso único.

